

Temperaturvalidering



Vid testning 2 var inkubatorskåpet inställt på 21°C och osteotainern paketerades tillsammans med två paket kolsyreis och fyra kylklampar i boxarna. Sofiaboxen höll erforderlig temperatur under 24 timmar och 22 minuter och Legend 24 under 22 timmar och 42 minuter (se diagram 3).

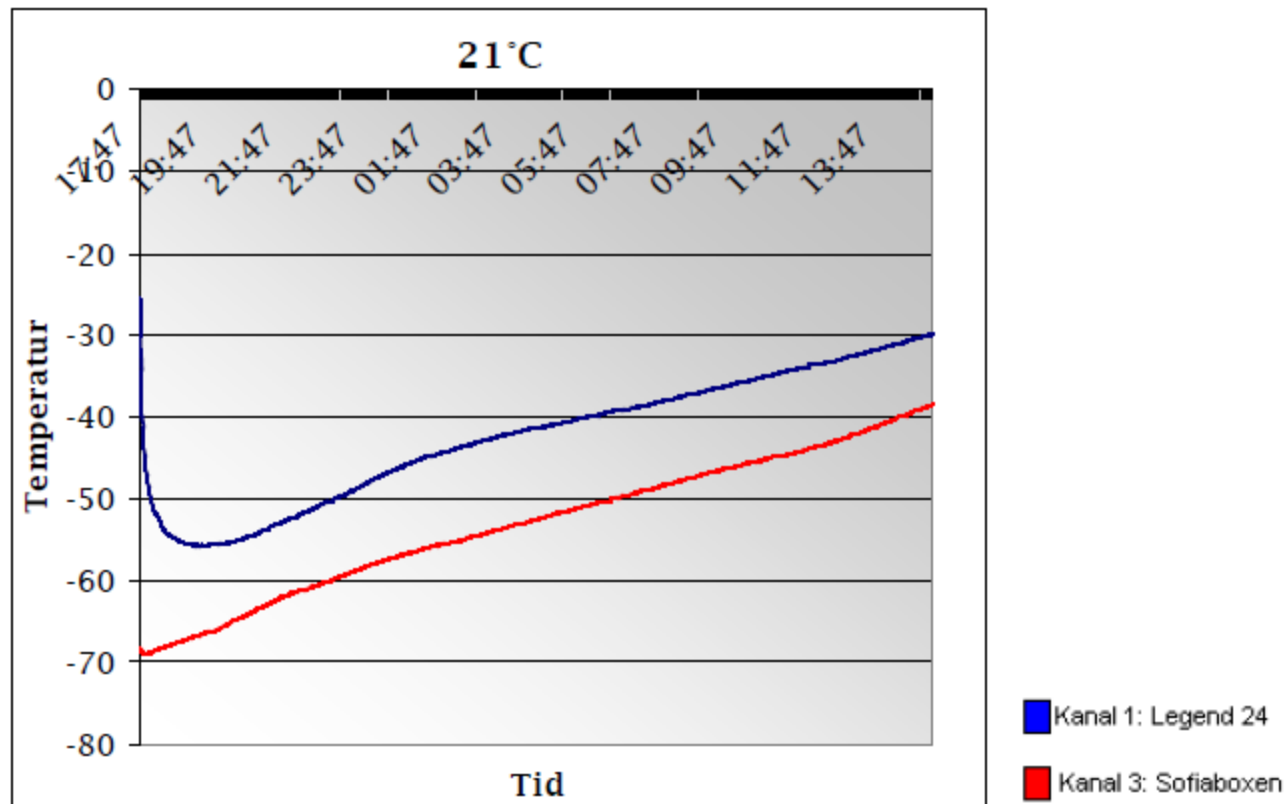


Diagram 3: Testning 3, 21°C, Kolsyreis



Vid testning 4 var inkubatorskåpet inställt på 37°C och osteotainern paketerades tillsammans med två paket kolsyreis och fyra kylklampar i boxarna. Sofiaboxen höll erforderlig temperatur under 6 timmar och 39 minuter och Legend 24 under 6 timmar och 55 minuter (se diagram 4).

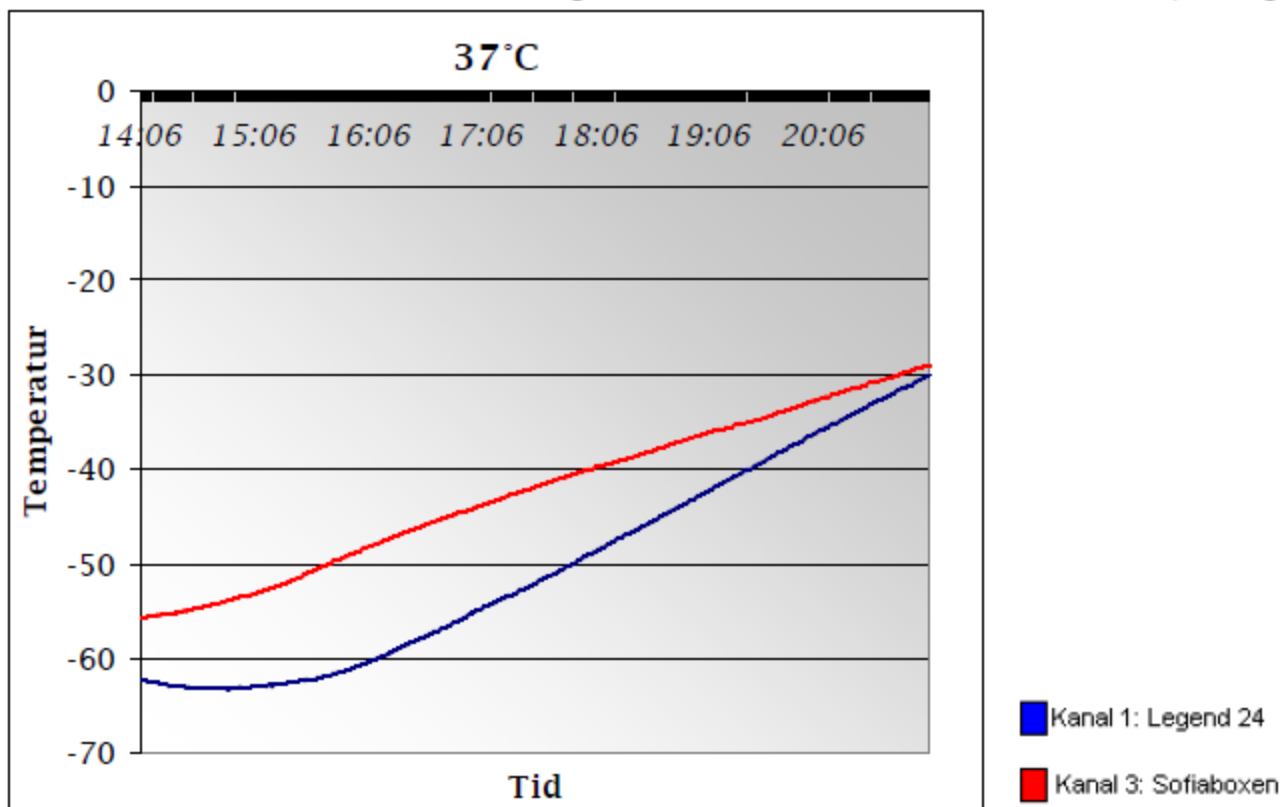


Diagram 4: Testning 4, 37°C, Kolsyreis







	Max Time Stamp	Max	Average	Min	Min Time Stamp
T1	2015-05-27 10:41:26	1,6 °C	-49,8 °C	-66,2 °C	2015-05-26 15:51:26
T2	2015-05-27 10:41:26	-14,9 °C	-52,4 °C	-67,1 °C	2015-05-26 16:41:26
T1-T2	2015-05-27 10:41:26	16,5 °C	2,7 °C	-19,0 °C	2015-05-26 12:21:26

test purpose:

Validering av frysboxar vid transport av benvävnad
T1=Legend 24
T2=Sofiaboxen

Graph Name:

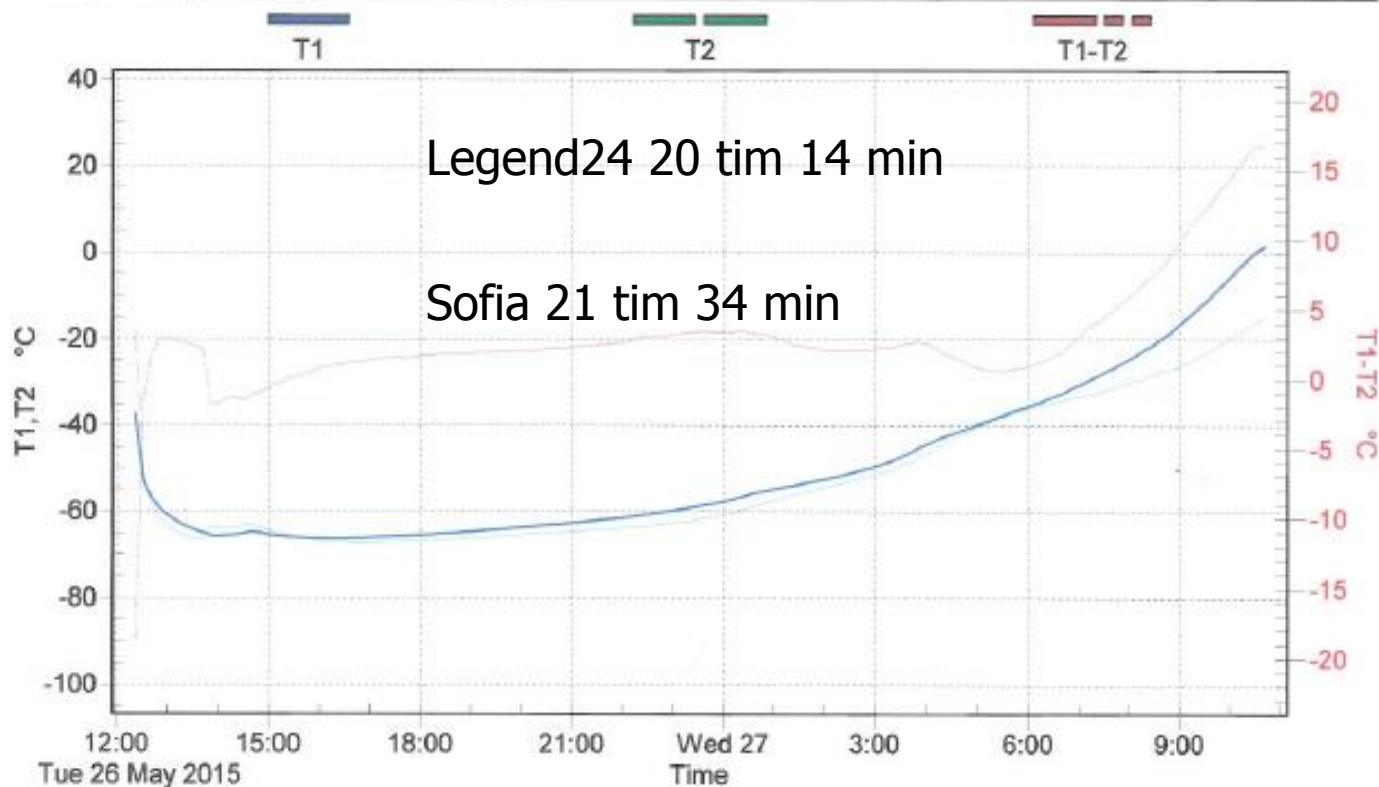

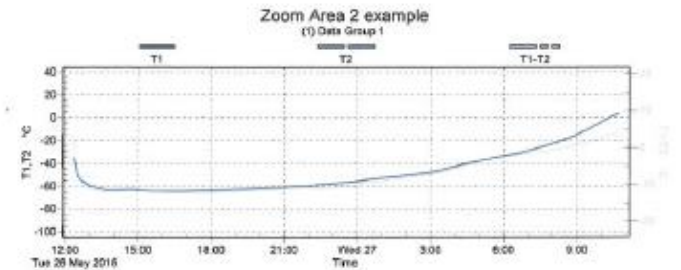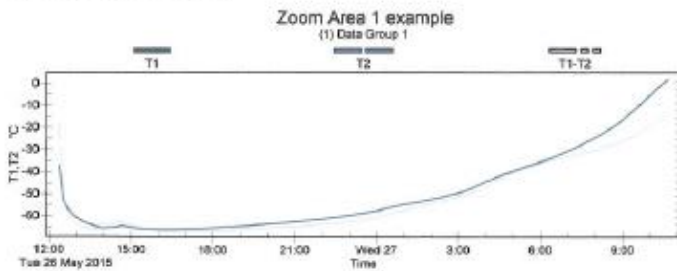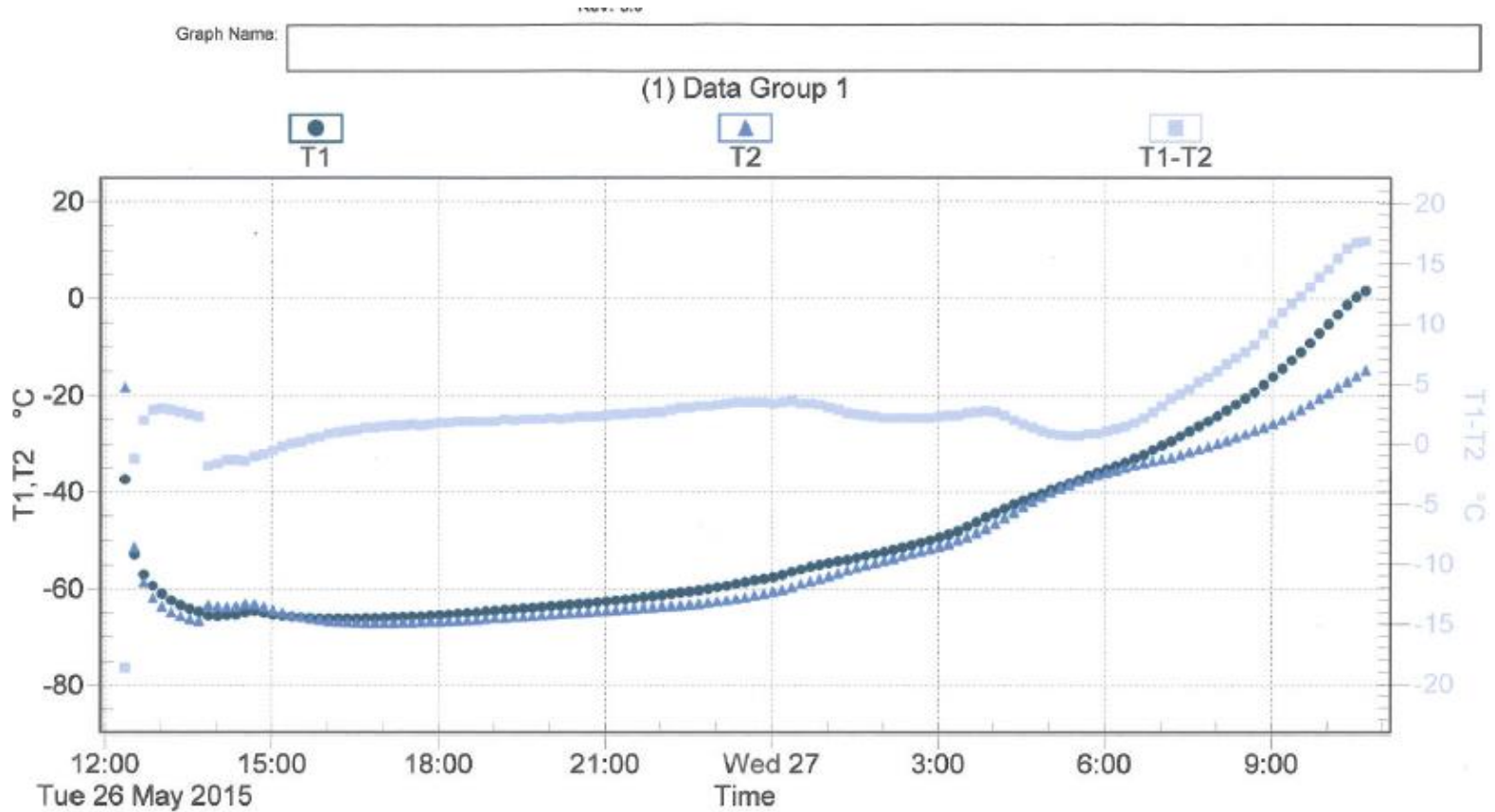

FlukeView Forms

Page 1 of 1

